


■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Functional. Intelligent. Dignified.

sentida sc

Universeel laag verpleegbed

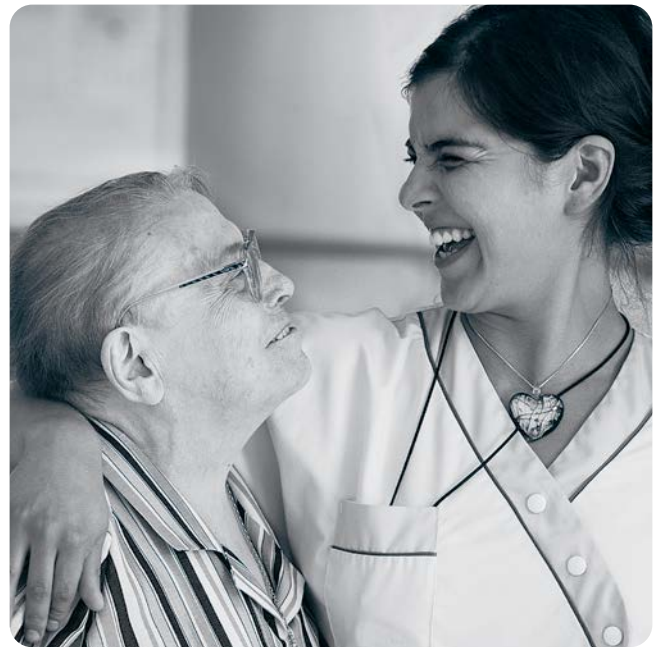



Zo veelzijdig als uw behoeften

sentida sc – universele lage verpleegbedden

Dankzij de medische en technische vooruitgang neemt de levensverwachting van de mensen al tientallen jaren gestaag toe. De hoge leeftijd die velen nu al bereiken, heeft uiteenlopende gevolgen.

Het is de grote wens van veel ouderen om hun laatste levensjaren in een vertrouwde omgeving te kunnen doorbrengen.

Tegelijkertijd is de perceptie van ouderen in de samenleving als geheel aan het veranderen: Tegenwoordig zien veel senioren pensionering niet meer als stilstand, maar als een levensfase waarin zij diverse interesses nastreven en actief willen leven.

Er is behoefte aan nieuwe concepten voor wonen en leven op oudere leeftijd. Hiertoe behoort de vraag naar meer huiselijkheid, individualiteit, veiligheid, comfort en flexibiliteit bij de inrichting van passende vormen van huisvesting.

wissner-bosserhoff is zich bewust van deze behoeften en veranderingen. Als internationaal actieve onderneming op het gebied van de zorg hebben wij ons hieraan aangepast.

Mensen op hoge leeftijd hebben verschillende behoeften en eisen met betrekking tot hun leven en leefomgeving.

Met het nieuwe bedplatform sentida sc en de op maat gesneden aanpak kunnen wij nog flexibeler, efficiënter en vraaggericht op de verschillende behoeften inspelen. Wij willen het behoud en de bevordering van de individuele mobiliteit als essentieel doel voor de zorg op een oplossingsgerichte manier ondersteunen.

Functional. Intelligent. Dignified.



Aan de zorg worden zeer hoge eisen gesteld: empathisch, sociaal, veelzijdig, intercultureel en vooral professioneel. Binnen de zorg zijn er grote veranderingen gaande en zijn er vele uitdagingen. Technische en digitale ontwikkelingen zullen een beslissende rol spelen bij de vormgeving van de zorg in de toekomst.

Thomas Erbslöh, directeur wissner-bosserhoff GmbH



Functional. Intelligent. Dignified.

De sentida sc premium verpleegbedden van wissner-bosserhoff zijn een consequente en vooral compromisloze omzetting van een allround-benadering voor de verdere ontwikkeling van de hedendaagse behoeften binnen de zorg en bij de ondersteuning in verschillende woonvormen.



Individueel mobiliseren

Behoud en bevordering van mobiliteit zijn centrale doelstellingen in de professionele zorg.



Veilig slapen

Rusten en slapen met behoeftegerichte functies van een universeel laag verpleegbed.



Bed-exit-sensorsysteem

Individuele ondersteuning en veiligheid door een intelligent sensorsysteem – zonder beperkingen.



Professioneel digitaliseren

Innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning van individuele zorgactiviteiten en complexe zorgprocessen.



Intelligent netwerk

Duurzaam voorbereid zijn op toekomstige zorgbehoeften.



Behoeftegerichte zorg

Optimale en veilige toegang tot de bewoner.

Woonconcepten

Maak kennis met geschikte concepten die zijn afgestemd op verschillende woonvormen, behoeften en vereisten.

Altstadt



6

Cottage



16

Sunset



22

Seaview



28



Woonconcept Altstadt

Design Dfx | Decor Noorse esdoorn



Op maat gemaakt voor...

- seniorenwoningen
- begeleid wonen
- revalidatieklinieken
- speciale verzorging en verpleging bij ernstige fysieke beperking of immobiliteit



Individueel mobiliseren

Behoud en bevordering van mobiliteit zijn centrale doelstellingen in de professionele zorg

Mensen hechten veel belang aan hun eigen mobiliteit. Mobiliteit is de beslissende factor bij alle activiteiten van het dagelijkse leven, veel andere dingen hangen ervan af.*

Het is niet zonder reden dat het behoud en de bevordering van de individuele mobiliteit, vooral van ouderen, een kerncategorie van de zorg is. Passende verpleegkundige maatregelen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van nieuwe functionele beperkingen en gezondheidsstoornissen die van invloed zijn op de mobiliteit en

daardoor kunnen leiden tot een grote afhankelijkheid van hulp en behoefte aan zorg.*

De mensen en hun mogelijkheden staan centraal

Voor de mobilisatie van mensen bestaat geen standaard techniek. Ondersteunende en begeleidende maatregelen moeten dus individueel worden aangepast aan de situatie en de persoon.

Behoud en bevordering van mobiliteit kunnen dus niet los van elkaar worden gezien, maar moeten nauw worden gekoppeld aan ergonomie en ergonomische werkprocessen.

Dit geldt zowel voor een veilige mobilisatie "uit bed" als "in bed".

Het universele lage verpleegbed sentida sc van wissner-bosserhoff is zo ontworpen dat de uitrusting aan verschillende behoeften en specifieke eisen kan worden aangepast.



In mijn bed ben ik veilig, ik kan het gemakkelijk instellen en ik kan comfortabel opstaan - zonder hulp.

Walter Schulte, bewoner



Video afspelen

Oplossing 1

SafeFree® onrusthekken – veilig mobiliseren ongeacht de lichaamslengte



SafeFree® is


- door zijn verdeling optimaal voor het uit bed stappen,
- individueel positioneerbaar,
- goed grijp- en omvatbaar,
- een veilige opstahulp - alleen of met ondersteuning.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:

De vier gedeelde zijanten maken een flexibele configuratie van de SafeFree® onrusthekken mogelijk - afhankelijk van behoefte, vereiste en budget als vaste of flexibele variant en als gedeeltelijke of volledige beveiliging van het verpleegbed. Individuele aanpassingsopties dragen bij tot meer duurzaamheid en investeringszekerheid

Oplossing 2

MobiStick 2 – handmatige mobilisatiehulp

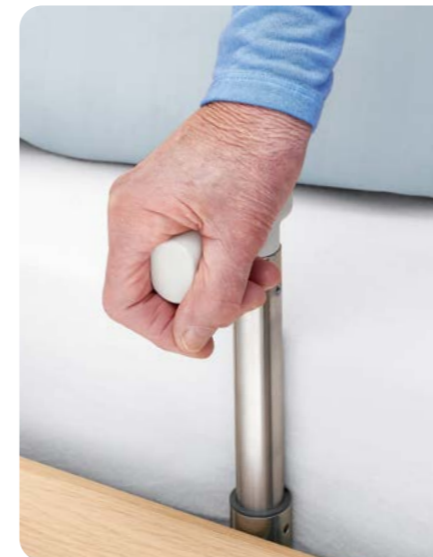

MobiStick 2 is

- snel en eenvoudig inzetbaar,
- slim en eenvoudig te bedienen,
- een ondersteuning bij het rechtop zitten op de rand van het bed,
- ergonomisch en biedt extra steun bij het opstaan.



Oplossing 3 SafeControl® handschakelaar – overzichtelijk, ergonomisch en intuïtief

- SafeControl® is**
- overzichtelijk en ergonomisch ontworpen,
 - intuïtief te bedienen en foutbestendig dankzij de voorselectie,
 - gemakkelijk af te lezen, zelfs in het donker, dankzij het bewegingssensorsysteem met achtergrondverlichting,
 - flexibel en veilig aan te brengen aan het SafeFree® onrusthek-element
 - voorzien van speciale verzorgingsfuncties
 - beveiligd tegen onjuist gebruik door een geïntegreerde vergrendelingsfunctie.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc: De SafeControl® handschakelaar kan zonder gereedschap snel en zonder veel moeite naar wens aan de linker of rechterzijde van het bed worden geplaatst.



Bewonersfuncties

- Rugsteunverstelling
- Autocontour
- Hoogteverstelling

Activeringstoetsen

- Omhoog / omlaag
- Led statusweergave

Verzorgingsfuncties

- Comfortpositie-automaat
- Preventiepositie-automaat

Bedieningsfilosofie SafeControl®


- Verpleegmodus:**
Alle keuzetoetsen zijn vrijgegeven
- Vergrendelmodus:**
Alle functies van de handschakelaar zijn vergrendeld.
- Bewonermodus:**
De blauwe keuzetoetsen kunnen door de bewoner worden gebruikt

Verpleegkundige maatregelen voor het behoud of de bevordering van de mobiliteit dragen bij aan de elementaire basisvoorwaarden voor zelfstandig leven.

Expert-standaard volgens § 113a SGB XI
"Behoud en bevordering van de mobiliteit in de zorg", actualisering 2020


Oplossing 4 Dubbele retractie van het ligvlak – veilig en comfortabel mobiliseren in bed

— Standaard ligvlak zonder belastingvermindering

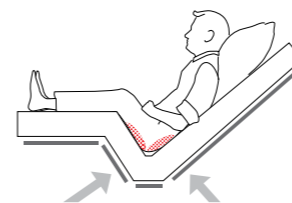

Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

+ WIBO-ligvlak met duidelijke belastingvermindering

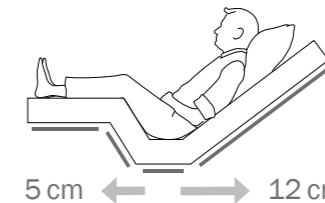

Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden

Dubbele retractie = 17 cm meer ruimte in bed!

- De dubbel retractie**
- optimaliseert het steunoppervlak in het zitgedeelte door het oppervlak van de rugleuning en de bovenbeensteun te vergroten,
 - vermindert de druk op gevoelige lichaamsdelen zoals het zitvlak en het stuitbeen,
 - vergemakkelijkt de ademhaling omdat er door een ontspannen zithouding meer ruimte ontstaat in de borstkas en de buikstreek,
 - biedt in combinatie met de lange rugleuning van bijna 90 cm een preventieve en comfortabele positionering voor immobiele bewoners.

Oplossing 5 Automatische posities – snel, eenvoudig en ergonomisch dankzij de one-touch-filosofie



Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten in bed dankzij de automatische positionering voor comfortabel zitten



Voorkoming van doorligwonden en vrijleggen van de hielen met behulp van de preventiepositie-automaat

- De automatische comfortzit- en preventieposities**
- bevorderen het welzijn van met name immobiele bewoners,
 - verbeteren de levenskwaliteit van bedlegerige bewoners,
 - ondersteunen zorgstrategieën op het gebied van decubitusprofylaxe en wondbehandeling.



Oplossing 1

Lage positie 23 cm – veilig slapen zonder beperking van persoonlijke behoeften



De lage positie van 23 cm biedt

- een huiselijke uitstraling zonder storende componenten,
- een praktische oplossing zonder dat de bewoner zich beperkt voelt,
- de bewoner de mogelijkheid om op eigen kracht toch veilig op te staan.



Veilig slapen

De behoeftegerichte lage positie voor comfortabel rusten en slapen

De meeste mensen willen tot op hoge leeftijd mobiel en onafhankelijk blijven. Door het natuurlijke verouderingsproces neemt de beweeglijkheid van het lichaam echter af of wordt beperkt. Dit verhoogt het risico op vallen.*

Bewoners van verzorgingstehuizen hebben een verhoogd risico om te vallen. Vaak gaan valpartijen zelfs gepaard met verwondingen die behandeld moeten worden.

Maar ook bij minder ernstige valpartijen duurt het genezingsproces vaak lang en neemt het zelfvertrouwen in eigen kunnen af.

Daarnaast is er de angst om weer te vallen (zogenaamde valangst). Dit kan vaak stressvoller zijn dan de val zelf. Angst om te vallen komt vaak voor bij oudere mensen.**

Mensen met valangst beperken hun eigen mobiliteit. Ze worden steeds afhankelijker en hebben meer zorg nodig.***

Valangst komt 's nachts vaker voor.

Duisternis beperkt ook het oriëntatievermogen, het inschatten van afstanden

en de loopveiligheid. Om deze cyclus te doorbreken moet een gerichte en op de behoeften afgestemde aanpak worden gevolgd om het zelfvertrouwen te versterken, valangst te verminderen en het lichaam optimaal te ondersteunen.

Met duurzame en conceptuele inrichtingsmogelijkheden biedt het verpleegbed sentida sc van wissner-bosserhoff oplossingen die rekening houden met verschillende verzorgingsniveaus en individuele mogelijkheden en capaciteiten van oudere bewoners.

Oplossing 2

SafeFree® op oriëntatiepositie – angstreductie zonder onnodige barrières



De plaatsing van het onrusthek aan het hoofdeinde kan

- in combinatie met de lage positie van 23 cm extra veiligheid bieden,
- onnodige barrières voorkomen en het valgevaar verminderen.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:

Lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en aanpasbaar onrusthekconcept dat onbeperkte afwegingen per geval mogelijk maakt bij de planning van zorgmaatregelen.

Oplossing 3

SafeFree® vast en flexibel – aangepast aan verschillende ruimteconcepten

Zorggemak door flexibele toegang



Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:

De 4 gedeelde zijanten in combinatie met een groot aantal configuratiemogelijkheden voor de SafeFree® onrusthekken - als vaste of flexibele variant en als gedeeltelijke of volledige bescherming van het verpleegbed - ondersteunen mensen met een valrisico en maken het mogelijk om voor ieder individu een passende configuratie te vinden.



Video afspelen



Video afspelen

* Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten; copyright © GKV-Spitzenverband 2011 / ISBN: 978-3-7747-2308-5
Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich; Stand: Januar 2013 Unter Berücksichtigung der 1. aktualisierten Fassung des Expertenstandards 2013 / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebedürftige Menschen (BIVA) e.V.

** S. Schlee: Sturz im Alter und seine Folgen - Der Anfang vom Ende? ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016

*** A. Zegelin: «Festgenagelt sein» - Der Prozess des Bettlägerigwerdens durch allmähliche Ortsfixierung; Pflege 2005; 18:281-288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2005



Oplossing 4

SafeSense® – autonoom en veilig verlaten van het bed met individuele oproepmelding

Het bed-exit-assistentiesysteem

- geeft een signaal aan het verplegend personeel dat de bewoner op het punt staat het bed te verlaten,
- werkt met een instelbare timerfunctie (0 - 30 min) volgens het verkeerslichtprincipe,
- kan naar wens worden aangesloten op een automatisch nachtlucht, die bij het verlaten van het bed wordt geactiveerd,
- kan worden aangesloten op het oproepsysteem,
- is beschikbaar als draadloze of bedrade oplossing,
- kan worden aangepast.**

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:
De som van de oplossingen maakt het verschil: lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en aanpasbaar onrusthekkenconcept + intelligent bed-exit-assistentiesysteem

SafeSense®
PDF-download



Bed-exit-assistentiesysteem – Wat betekent dat eigenlijk?

SafeSense® geeft een signaal aan het verplegend personeel dat de bewoner het bed verlaten heeft of op het punt staat het bed te verlaten. Hierdoor kunnen valpartijen eerder worden vastgesteld dan door routinecontroles.

In principe werkt het bed-exit-assistentiesysteem als een soort verkeerslicht. De werking kan als volgt duidelijk en eenvoudig worden uitgelegd:

-  **Timer niet geactiveerd**
-  **Timer geactiveerd**
→ bijv. 15 minuten voor nachtelijk toiletbezoek
-  **Timer afgelopen**
→ signaal aan het oproepsysteem

SafeSense® – de intelligente bed-exit-sensoren


De bevordering en het behoud van de gezondheid op oudere leeftijd en de versterking van de zelfstandigheid van oudere mensen in combinatie met een verbetering van de levenskwaliteit is de visie van wissner-bosserhoff bij de ontwikkeling van producten voor de verzorging.

Het thema veiligheid, in combinatie met intelligente bed-exit-sensortechnologie voor dag en nacht en nieuwe technische mogelijkheden, speelt hier een essentiële rol.



Meer veiligheid – minder VBM*

- snelle reactietijd bij valincident
- hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- minder controlerondes
- ideaal in combinatie met sentida sc lage verpleegbedden en SafeFree®-onrusthekken

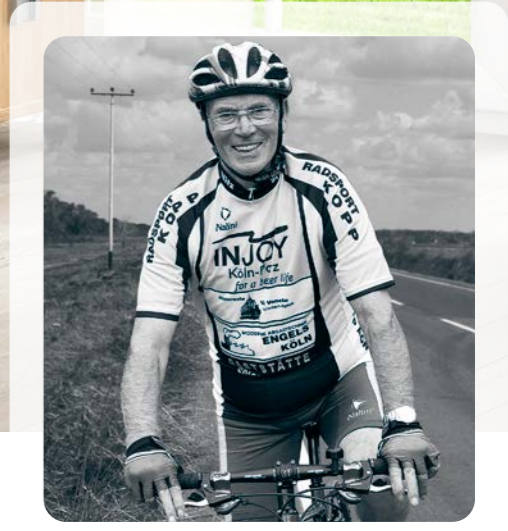

Woonconcept Cottage

Design Ts | Decor Iep Salisbury



Op maat gemaakt voor...

- dementie-woongroepen
- begeleid wonen
- revalidatieklinieken met bijzondere aandacht voor neurologische aandoeningen
- speciale verzorging en verpleging bij lichte fysieke beperkingen



Professioneel digitaliseren

Innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning van individuele zorgactiviteiten en complexe zorgprocessen

Deskundigen zien de digitalisering van de ouderenzorg, waarmee door middel van technische innovaties het zorgpersoneel kan worden ontlast, als een grote kans.

Digitalisering ondersteunt de dagelijkse verpleegroutine

Door het gerichte gebruik van sensoren kunnen bijvoorbeeld mogelijke valrisico's en gebrekkige bewegingspatronen bij bewoners in een vroeg stadium worden opgespoord en gemeld. Het gebruik van mobiele apparatuur maakt ook mobiel en vlot werken met tijdswinst mogelijk.

Specialistische kennis en informatie over zorgonderwerpen kunnen sneller en vanaf elke locatie worden geraadpleegd. Onderlinge sociale relaties, maar ook relaties met familieleden, kunnen zonder veel moeite beter worden onderhouden.

Werkprocessen kunnen nog efficiënter worden gemaakt als zorginstellingen de gegevens van hun digitale documentatie systematisch evalueren en samenvoegen. Uit deze resultaten kunnen correlaties worden afgeleid tussen de uitgevoerde behandelingen en de eisen voor een betere zorgplanning.

wissner-bosserhoff richt zich momenteel op drie onderwerpen en de daarmee verbonden risico's voor de bewoners: vallen, decubitus en incontinentie.

De digitale zorgassistent SafeSense® 3 kan helpen om de gegevens te analyseren en zo nodig preventieve maatregelen te nemen.

De zorg heeft digitalisering nodig - functioneel, intelligent en menselijk.



Vechtetal Pflege GmbH heeft zich tot doel gesteld de klassieke ouderenzorg met behulp van innovatieve technologie opnieuw uit te vinden. We hebben voor SafeSense® 3 gekozen omdat de veiligheid van onze bewoners onze hoogste prioriteit heeft. Door sneller te reageren op valincidenten kunnen ernstige gevolgen van vallen vaak worden voorkomen.

Eike Jonker, directeur Vechtetal Pflege GmbH

Oplossing 1




SafeSense® 3 – van bed exit-assistentiesysteem tot digitaal platform

Na meer dan 6 jaar ervaring met het geïntegreerde bed-exit-sensorsysteem is de tijd rijp voor een echte digitale zorgassistent. Met het bed-exit-sensorsysteem SafeSense® en het intelligente verpleegbed sentida 7-i heeft wissner-bosserhoff al sinds 2014 uitgebreide ervaring met digitale producten kunnen opdoen.

In deze periode is SafeSense® uitgegroeid tot een zorgassistent met nog meer ondersteunende functies en wordt dankzij de open architectuur aanbevolen als een toekomstbestendig digitaliseringsplatform. Het kan eenvoudig achteraf worden uitgerust met extra functies, die het verplegend personeel extra ontlasten.

SafeSense® 3
PDF-download



-  Bewegingsmonitoring
-  Bed-exitmonitoring
-  Zorgmonitor & app
-  Vochtigheidssensor

Intelligent netwerk

SafeSense® 3



1

Mobiele terminals

Altijd alle gegevens in één oogopslag



2

Zorgmonitor

met gegevensvisualisatie

Decubituspreventie door bewegingsmonitoring

Valpreventie door bed-exit-monitoring

Veiligheid
Beveiliging van de bewonersgegevens door versleutelde gegevensoverdracht en decentrale gegevensverwerking



3

Oproepsysteem-aansluiting

Meer veiligheid tijdens nacht- en weekenddiensten



4

Gepatenteerd bedsensorsysteem

Assistentie voor de zorgverlener




Video afspelen



Het verpleegbed van de toekomst is meer dan alleen maar een bed - het biedt effectieve zorg met behulp van intelligente oplossingen en een hogere levenskwaliteit voor de bewoner.

Uwe Deckert | Hoofd Marketing wissner-bosserhoff GmbH



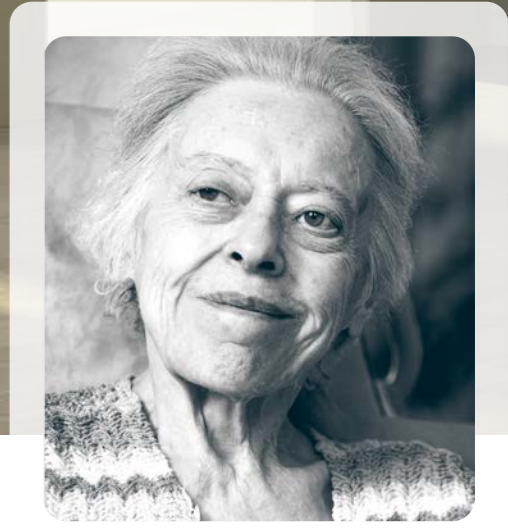

Woonconcept Sunset

Design C | Decor Nordic Teak



Op maat gemaakt voor...

- hospices
- palliatieve afdelingen
- woongroepen met speciale verzorging/verpleging (bv. comapatiënten)
- speciale verzorging en verpleging met een hoge immobiliteitsgraad



Behoeftegerichte zorg

Optimale en veilige toegang tot de bewoner

Mobilisatiemaatregelen en de dagelijkse zorg voor de bewoners kunnen zeer inspannend en belastend zijn voor het verplegend personeel. Het kan gebeuren dat een zorgverlener in één dienst in totaal tot 1,8 ton* moet tillen.

Lichamelijke stress en spanning bij verzorgers kan ook een nadelig effect hebben op de verzorgde persoon.

De daaruit voortvloeiende angstreacties van de bewoner kunnen zijn zelfmotivatie en mobiliteit aanzienlijk beperken, zodat beide partijen in hun nauwe interactie in gevaar kunnen worden gebracht.

sentida sc kan zowel verplegend personeel als bewoners ondersteunen.



De ergonomische optimalisatie van belangrijke werkstappen en de optimale positie van het verpleegbed, het gebruik van geïntegreerde hulpmiddelen en externe verpleeghulpmiddelen verminderen de fysieke belasting.

Koen de Doncker, fysiotherapeut, osteopaat en ergonoom
Auteur van het wissner-bosserhoff Care-booklet voor ergonomisch werken in de zorg



Video afspelen



Oplossing 1

3-traps-strategie –

op de situatie en behoeften afgestemde zorg, verpleging en ondersteuning

Het comfortabele verstelbereik van 23 tot 80 cm

- maakt een ergonomische en rugvriendelijke werk-/verzorgingspositie op 80 cm mogelijk,
- biedt in combinatie met de afzonderlijk instelbare boven- en onderbeensteun extra bewegingsvrijheid, bijv. bij de basisverzorging of de wondverzorging,
- maakt een efficiënte “bed/stoel”-transfer en omgekeerd mogelijk met de mobilisatiehoogte op stoelhoogte van 41 cm,
- biedt een veilige slaappositie op 23 cm hoogte.

80 cm

Optimale verpleegpositie



41 cm

Veilige mobilisatie op stoelhoogte



23 cm

Valpreventie tijdens het slapen



Oplossing 2

Onderruimte van 15 cm –

gerichte inzet van verpleeghulpmiddelen



Voor positionering uit bed of in bed met maximaal comfort, meer handelingsvrijheid en een hoge mate van ergonomie voor de zorgverlener, zijn diverse til- en transfersystemen beschikbaar. Het verpleegbed moet daarbij optimaal zijn afgestemd op de transferoplossing.

Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:

Dankzij de royale onderruimte en de barrièrevrije toegang tot het bed via de SafeFree® onrusthekken, kan er optimaal ergonomisch worden gewerkt en zorg op maat worden verleend.



Oplossing 3

Centrale rem –
asrem aan het voeteneinde van het gerieflijke verpleegbed



Optioneel heeft de sentida sc een centrale rem aan het voeteneind, die gemakkelijk en veilig te bereiken is. Door de centrale rem te ontgrendelen kan het bed snel en gemakkelijk worden verplaatst, bijv. voor reiniging

Oplossing 4

Comfortligvlak –
meer veiligheid voor immobiele bewoners




Het comfortligvlak is uitgerust met 55 veerelementen die zorgen voor een hoog ligcomfort en extra drukontlasting, om gevolgschade, bijv. door mobiliteitsbeperkingen, te voorkomen.


Het extra **VOORDEEL** van sentida sc:
In combinatie met de dubbele retractie en de automatische comfortzitpositie kan het comfort-ligvlak preventieve verzorgingsmaatregelen ondersteunen en bovendien de levenskwaliteit verhogen.

Oplossing 5

Geïntegreerde bedverlenging –
flexibel instelbaar zonder gereedschap

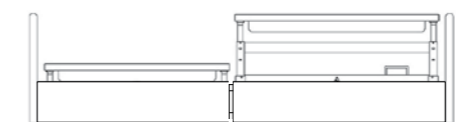


210 cm
Alternatieve bedlengte 210 cm: Bescherming met aan het voeteneinde langere onrusthekken zonder accessoires en zonder opening > 318 mm*

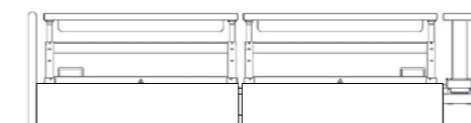

220 cm
Bedverlenging tot 220 cm: ook bij sentida met gedeelde onrusthekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt gegarandeerd door een protector (accessoire) aan het voeteneinde.

De sentida sc heeft standaard een geïntegreerde bedverlenging, die in elke configuratie voldoet aan de eisen van IEC 60601-2-52.

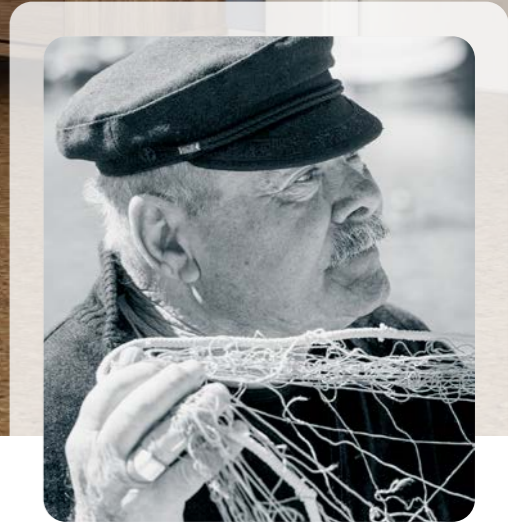

Woonconcept Seaview

Design Gx | Decor Italian Oak



Op maat gemaakt voor...


- seniorenwoningen
- begeleid wonen
- speciale verzorging en verpleging bij lichte fysieke beperkingen
- dementie-woongroepen



Technische gegevens

Volgens bijlage VIII, #13 van de (Duitse) Verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR) 2017/745, is het verpleegbed sentida sc een medisch hulpmiddel van klasse I.

Buitenafmetingen	208 x 106 cm
Nominale afmetingen ligvlak	87/90 x 200 cm
Hoogteverstelling	23 - 80 cm (afhankelijk van het type wielen)
Rugsteunverstelling	70° ± 5° incl. rugleuning-terugbeweging RLR van ca. 12 cm
Bovenbeensteunverstelling	30° ± 5° incl. bovenbeensteun-terugbeweging van ca. 5 cm
Zwenking	hoofdeinde ca. 17° / voeteneinde ca. 17°
Veilige werklast*	270 kg (235 kg bewonergewicht, 35 kg matras + toebehoren)
Bedgewicht	ca. 115 kg (afhankelijk van het model)
Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	II
Onderruimte	15 cm

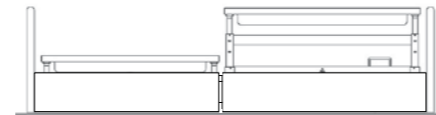

Veiligheid

wissner-bosserhoff GmbH is gecertificeerd volgens de bepalingen van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen, van DIN EN ISO 13485 voor de vervaardiging van medische producten en van ISO 14001 voor milieumanagement. Bovendien laat wissner-bosserhoff zijn productieprocessen en management regelmatig door TÜV Süd controleren.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-certificaat voor productveiligheid, TÜV Süd



Attest inzake onrusthekken



ISO 9001

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert



ISO 14001

Zertifiziertes Umweltmanagementsystem


www.tuev-sued.de/ms-zert



Wij hebben de broeikasgasemissies ten gevolge van de activiteiten van onze onderneming laten registreren** en compenseren deze door de aankoop van klimaatbeschermingscertificaten voor de jaren 2022 en 2023.

Nachtkastjes en andere accessoires



vindt u in de overige folders of op www.wi-bo.eu (NL) & www.wi-bo.be (BE)

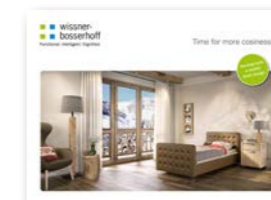



Kleuren & Design

Kleuren | Decors*

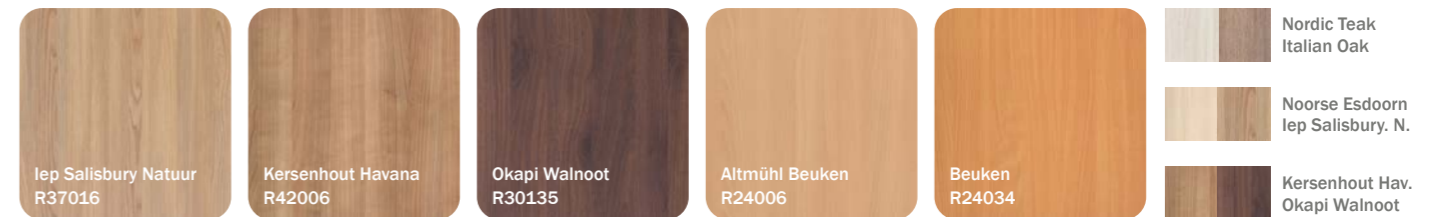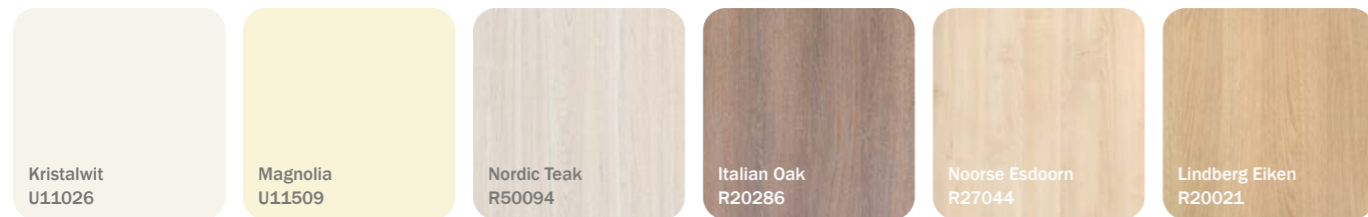

Kunstleer | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df*



Stof | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df*



Kunstleer: Smoke
Decor: Nordic Teak



Stof: Zand
Decor: Noorse Esdoorn



Design

Design | Hoofd-/voeteneinde



Design A
Hoofd-/voeteneinde



Design Ak
Hoofd-/voeteneinde



Design Df
Hoofd-/voeteneinde



Design Dfx
Voeteneinde vlak



Design C
Hoofdeinde Voeteneinde



Design G
Hoofdeinde Voeteneinde



Design Gx
Voeteneinde vlak



Design O
Hoofd-/voeteneinde



Design Ox
Voeteneinde vlak



Design Ts
Hoofdeinde Voeteneinde



Design Tsx
Voeteneinde vlak

Softcover – betaalbaar en flexibel

Alle getoonde stof- en kunstleerdecors zijn covers die u zelf eenvoudig en zonder gereedschap op het hoofd- en voeteneinde* van uw verpleegbed kunt aanbrengen. De softcovers zijn uiterst slijtvast, vocht-, vuil- en waterafstotend en ademend.



Keuze uit 2 modellen – Comfort of extra mobiel

De sentida sc is beschikbaar in twee modelvarianten - comfort en extra mobiel. Hij is gemakkelijk en moeiteloos te manoeuvreren - vooral de extra mobiele modelvariant met grotere wielen voor nog meer rijcomfort. Zo kunnen zelfs ernstig gehandicapte en immobiele bewoners in het verpleegbed deelnemen aan het leven in hun woonruimte of zorginstelling.

Beide bedvarianten hebben een centrale wielvergrendeling**, waarmee het bed met slechts één voetbeweging gemakkelijk kan worden geremd.



comfort



extra mobiel



Optioneel ook met doorlopende onrusthekken en 4 SafeFree® onrusthekken.

Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium B.V.

Research Park Haasrode | Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee
T +32 16 89 81 91 | F +32 491 22 07 01
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

