

Multicare LE



Cama para cuidados intensivos

Multicare LE un cambio para mejorar





100%

de ayuda para el personal
médico, de enfermería
y para el paciente

Ventajas de Multicare LE





- Recuperación más rápida gracias al sistema Mobi-Lift®
- Menos caídas gracias al concepto de los barandales, a la alarma de salida de la cama y al sistema i-Brake
- Mayor confort al paciente debido a la posición de silla y Ergoframe®



Paciente

- Menor esfuerzo físico y manipulación más fácil del paciente gracias a la lateralización
- Transporte más seguro y rápido gracias a i-Drive Power.
- Mejor control de infecciones gracias a Sanitized®, un tratamiento antibacterial



Personal

- Menos costos de VAP, caídas, infecciones y úlceras por presión
- Ahorro de tiempo para que el personal realice trabajos calificados
- Optimización de la economía de los tratamientos al reducir la duración de las hospitalizaciones



Administración

Multicare LE es fácil de usar

LATERALIZACIÓN BASADA EN LA PLATAFORMA

- Contribuye a mover al paciente con el mínimo esfuerzo.
- Las actividades rutinarias del personal médico y de enfermería, como cambiar al paciente de posición para lavarlo, asearlo y vestirlo, se vuelven más fáciles y ergonómicas.
- Sólo es necesario girar al paciente hacia un lado usando la lateralización de la cama.





LESIONES LUMBARES


Ergonómicamente correcto

Ergonómicamente incorrecto

El 52% del personal médico y de enfermería se quejan de dolor de espalda crónico.



La cama Multicare LE con lateralización.

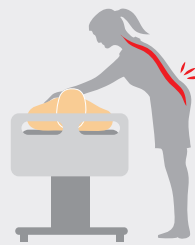

Una cama sin lateralización. Un alto riesgo de lesión en el área lumbar.



LATERALIZACIÓN

Permite minimizar el esfuerzo necesario por parte del personal de cuidados intensivos y optimizar las condiciones de trabajo durante otras actividades, como la movilización y el traslado del paciente de la cama a una camilla.




RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y MAYOR COMODIDAD



MENOS LESIONES LUMBARES Y ESFUERZO FÍSICO



REDUCCIÓN DE LOS COSTOS ADICIONALES OCASIONADOS POR LAS LESIONES LABORALES DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA ASÍ COMO LOS EFECTOS DEL SÍNDROME DE INMOVILIDAD

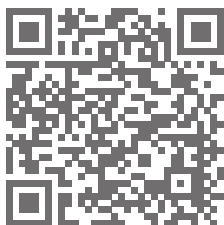

Multicare LE es fácil de usar





MOBI-LIFT®

- Ayuda a que los pacientes salgan de la cama de forma segura y con el menor esfuerzo del personal médico y de enfermería.
- La solución única de LINET combina un bastón de apoyo con ajuste de altura.
- Contribuye a una participación activa del paciente.
- Ayuda a minimizar el síndrome de inmovilidad, movilizándolo al paciente de forma temprana.



I-DRIVE POWER

- Traslado motorizado de paciente con el mínimo esfuerzo.
- La exclusiva función Safety Sense™ evita el riesgo de activación automática o accidental, así como su uso incorrecto.
- El acelerador inteligente optimiza la velocidad de conducción en diferentes situaciones.

Seguridad absoluta



La seguridad es un factor clave para la cama Multicare LE. Todas las funciones de la cama están pensadas no sólo para que el paciente se sienta lo más seguro posible, sino para que realmente lo esté.

SAFEPlus
CONCEPT



BARANDALES DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE

Los barandales progresivos diseñados con el concepto de espacios seguros, los sensores en los barandales que detectan la posición baja y el ajuste excepcional de la altura ofrecen una excelente protección frente a las caídas.



I-BRAKE

El freno automático evita los movimientos no controlados y las caídas que se producen al apoyarse en una cama que no se encuentra frenada.



ALARMA MULTIZONA DE SALIDA DE LA CAMA

Se puede seleccionar la opción de alerta sonora más adecuada según el riesgo de caída del paciente en cuestión. Esta función ayuda al personal a controlar permanentemente el riesgo de caída y en consecuencia, a reaccionar a tiempo.



LLAMADA A ENFERMERÍA

La función de llamada a enfermería está siempre a mano para prevenir situaciones peligrosas o para solicitar ayuda del personal médico o de enfermería.

Ideal para la prevención





SILLA ORTOPNEICA

La posición ortopneica contribuye a maximizar la función respiratoria y aumenta la comodidad del paciente.



DRENAJE PULMONAR MÁS SENCILLO Y POSICIONAMIENTO MANUAL DEL PACIENTE CON MENOR ESFUERZO



MENOS COMPLICACIONES PULMONARES GRACIAS A LA POSICIÓN ORTOPNEICA



REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA, EL DISTRÉS RESPIRATORIO, LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, Y DE LA DURACIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES

Prevención de úlceras



PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

El diseño abierto de la cama Multicare LE permite usar varios sistemas de colchones para prevenir la aparición de úlceras por presión o para curarlas, según las necesidades del paciente.



Colchón Virtuoso APM con presión cero y tecnología de 3 celdas.



Colchón Symbioso con diseño integrado.

SISTEMA ERGOFRAME®

Mejora la comodidad y ergonomía del paciente mientras está recostado sobre la cama, al mismo tiempo que minimiza la compresión en el área pulmonar y abdominal.



LATERALIZACIÓN

Ayuda al personal médico y de enfermería a cambiar regularmente la posición de los pacientes para evitar lesiones. De esta forma, es posible llevar a cabo eficazmente este tratamiento preventivo básico con menos esfuerzo y un menor riesgo de lesiones lumbares.

Multicare LE es práctica

PANEL MULTIBOARD

Panel de control fácilmente accesible con una interfaz de usuario intuitiva, orientado para indicar la posición a 30 grados de la cabecera de la cama.



I-DRIVE

La quinta rueda retráctil, i-Drive, contribuye a reducir el esfuerzo necesario por parte del personal para conducir y guiar la cama.





BANDEJA LATERAL PARA CHASIS RADIOGRÁFICO

El soporte lateral para el chasis radiográfico permite obtener radiografías de tórax de forma segura sin necesidad de mover al paciente en la cama.



BÁSCULA

El Sistema de Báscula Avanzada integrada en la cama Multicare LE es capaz de indicar el peso exacto del paciente en todas las posiciones de la cama. Muestra el valor actual del peso del paciente, y los cambios de peso registrados a lo largo del tiempo.



PEDALES

Cómodo ajuste de la altura y la lateralización de la cama sin utilizar las manos.



TECLADOS ILUMINADOS PARA EL PACIENTE

Para que el paciente se oriente mejor por la noche.

Control de infecciones





DESINFECCIÓN PERFECTA

El diseño en columnas y las superficies planas y uniformes permiten realizar una desinfección sencilla y completa.



TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO SANITIZED®

El tratamiento Sanitized® en las zonas más comúnmente expuestas de la cama Multicare LE ayudan a reducir el crecimiento y la actividad de muchos microbios. La actividad del ion plateado natural es segura para el contacto del paciente y tendrá la misma duración que la vida útil de la cama. El tratamiento cumple con las funciones estándar de higiene de la cama Multicare LE LINET sin costos adicionales.

Sanitized®

- Protege el polímero contra el deterioro microbiano y fúngico.
- Es seguro para el contacto del paciente.
- Resistente a los lavados, y de duración prolongada.
- Utiliza un ion plateado activo natural.
- Complementa las otras funciones higiénicas de la cama.
- Es una función estándar.

Este catálogo contiene información sobre productos que pueden o no estar disponibles en algún país, y en caso de ser aplicable, podrían haber recibido la aprobación o liquidación de mercado de un cuerpo gubernamental a causa de los diferentes indicadores y restricciones en cada país. Cada país tiene unas leyes, regulaciones, y prácticas médicas específicas que gobiernan la comunicación médica y de productos médicos en Internet. Nada en este documento debe interpretarse como una solicitud o promoción de cualquier producto que no está autorizado por las leyes y reglamentos del país donde el lector resida.

Sanitized® no reducirá o protegerá al usuario de este artículo contra las enfermedades bacterianas.




Cama inteligente

La cama inteligente Multicare LE de LINET puede equiparse para proporcionar información sobre la seguridad del paciente, el estado de la cama y los requisitos de mantenimiento sin necesidad de recibir una compleja formación; por lo tanto, es muy fácil de usar.



SafetyMonitor

El sistema inteligente SafetyMonitor mejora la gestión de riesgos, especialmente en la atención de los pacientes en entornos de cuidados intensivos. El sistema recoge información automáticamente de las funciones de seguridad de la cama, enseñándoselas así al personal médico y de enfermería de forma intuitiva.

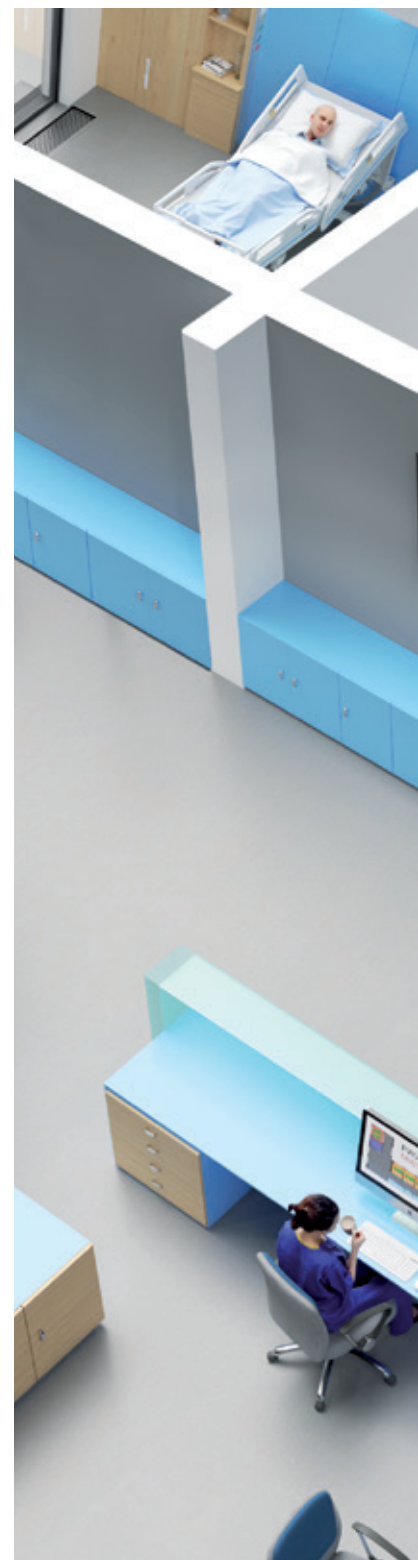



Información de SafetyMonitor

puede ser vista desde cualquier dispositivo:
iPad, smartphone, PC.



BedMonitor

Permite mantener la comodidad del paciente gracias al uso de la tecnología inalámbrica, que controla constantemente las funciones de seguridad de la cama (la altura de la cama, la posición de los barandales, el ángulo del respaldo o la activación de los frenos).

Especificaciones básicas



de la cama



CERTIFICADOS

LINET cuenta con la certificación de cumplimiento de los sistemas de calidad y estándares europeos: EN ISO 9001:2000 y EN ISO 13485:2003.

Los productos se fabrican de acuerdo con los estándares europeos de tecnología médica y camas hospitalarias: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, 93/42/CEE y 90/384/CEE .

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	230V AC, 50 /60 Hz
Entrada máxima	370 VA
Protección contra agua y polvo	IP X4
Tipo de protección contra la corriente eléctrica	Class I
Nivel de protección contra los daños de la corriente eléctrica	Pieza de contacto con el paciente tipo B
Modo de funcionamiento del motor eléctrico (factor de carga)	max. 2 min ON / 18 min OFF

PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones externas	215x105 cm (sin extensión del lecho)
	237x105 cm (con la máxima extensión del lecho)
Dimensiones del colchón	208 x 86 cm
Altura máxima del colchón	23 cm
Regulación de altura	44-82 cm
Inclinación lateral	±30°
Inclinación para posiciones de TR/ATR	13°/16°
Peso (equipo básico)	224 kg
Carga máxima de seguridad	250 kg



Multicare LE

Paciente

- Recuperación más rápida gracias al sistema Mobi-Lift®
- Menos caídas gracias al concepto de los barandales, a la alarma de salida de la cama y al sistema i-Brake
- Mayor confort al paciente debido a la posición de silla y ErgoFrame®



- Menor esfuerzo físico y manipulación más fácil del paciente gracias a la lateralización
- Transporte más seguro y rápido gracias a i-Drive Power
- Mejor control de infecciones gracias a Sanitized®, un tratamiento antibacterial



Personal

Administración

- Menos costos de VAP, caídas, infecciones y úlceras por presión
- Ahorro de tiempo para que el personal realice trabajos calificados
- Optimización de la economía de los tratamientos al reducir la duración de las hospitalizaciones



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Mexico | A member of LINET Group SE

Avenida Paseo de las Américas No. 41 | Planta Baja, Lomas verdes 3a sección | 53125 Naucalpan de Juárez | Phone: +52 55 5393-5256 | E-Mail: info_mexico@wi-bo.com

