

# Voor comfort, veiligheid en hygiëne

## STABILITEIT



De zijkanten van het matras zijn versterkt met verstevigd schuim met hoge dichtheid. Dit garandeert stabiliteit en comfort voor de patiënt bij zitten op de rand van het bed. Het maakt het ook gemakkelijker om het matras te hanteren.



## OPTIMALE DRUK



De onderkant van het matras is speciaal geprofileerd om de druk op de patiënt te optimaliseren als het bed in positie wordt gebracht.



## HYGIËNE



Het matras wordt beschermd door een waterdichte en dampdoorlatende laag, die huidvriendelijk is. De naden zijn gestikt en hoogfrequent gelast, zodat de hygiëne eenvoudig wordt bewerkstelligd.




Het matras wordt beschermd door een waterdichte en dampdoorlatende laag die vriendelijk is voor de huid van de patiënt.

	Max. belasting	Standaardafmetingen	Schuimtype	Afdeklag	Tweezijdig bruikbaar	Omgekeerde positie mogelijk	Thermic™
CliniCare 30	230kg	200x86x14 200x90x14	PU + visco-elastisch	Waterdicht, ritssluiting 360°	✗	✓	✓
CliniCare 20	230kg	200x86x14 200x90x14	PU + visco-elastisch	Waterdicht, ritssluiting 360°	✗	✓	✗
CliniCare 10	200kg	200x86x14 200x90x14	PU + visco	Waterdicht, ritssluiting 360°	✗	✓	✗
PrimaCare 20	200kg	200x86x14 200x90x14	PU	Waterdicht, ritssluiting 360°	✗	✓	✗
PrimaCare 10	200kg	200x86x14 200x90x14	PU	Waterdicht, ritssluiting 180°	✗	✓	✗
EffectaCare 20	150kg	200x86x14 200x90x14	PU	Waterdicht, ritssluiting 180°	✗	✓	✗
EffectaCare 10	110kg	200x86x14 200x90x14	PU	Waterdicht, ritssluiting 180°	✓	✓	✗

# Varianten

Mogelijk op bestelling	Parameter	Beschikbaar voor
Bariatrische versie	Gewichtslimiet 300kg	EffectaCare 20, CliniCare 20
Juniorversie	Geschikt voor het Eleganza Smart Junior bed	PrimaCare 10, PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30
Kinderversie	Geschikt voor het Tom 2-bed	EffectaCare 20, CliniCare 10
Afgesneden hoeken	Meer ruimte voor accessoires	EffectaCare 20+ (bariatrische versie), PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30
Ergoframe®-versies	Geschikt voor Ergoframe® patiëntondersteuning	PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30

# Passieve matrassen

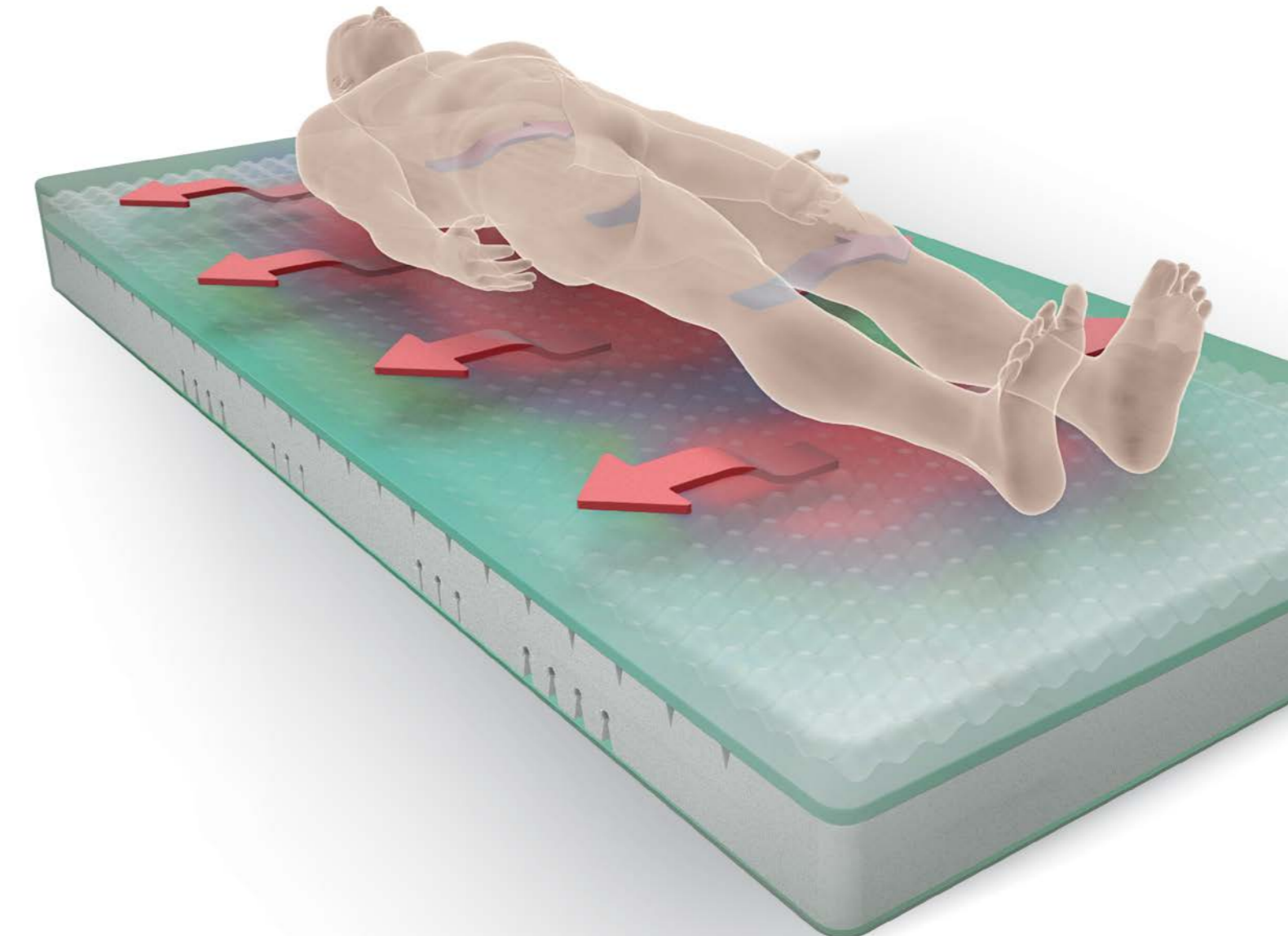

Members of LINET Group

### wissner-bosserhoff belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen  
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64  
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

### wissner-bosserhoff Nederland B.V.


Amstelwijckweg 2 | NL-3316 KA Dordrecht  
Tel.: +31 (0)78 652 18 50 | Fax: +31 (0)78 652 18 55  
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.com



# Clinicare 30 met een Thermic™-laag

De Clinicare 30 maakt gebruik van de unieke Thermic™-technologie, die preventie van decubitus bij de patiënt aanzienlijk verhoogt.

- Het matras is gemaakt van koudschuim en visco-elastisch schuim.
- Het visco-elastische schuim bestaat uit een gehele oppervlaktelaag, zodat het matras het hoogste lig-comfort biedt.
- De Thermic™-laag zorgt voor een optimale temperatuur onder de patiënt en verhoogt de preventie van decubitus.

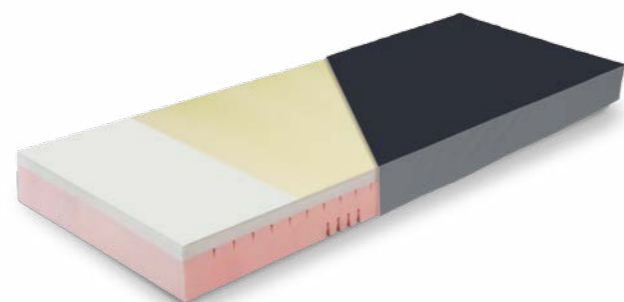

Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg



## THERMIC™-TECHNOLOGIE

Dankzij de Thermic™-technologie verbetert het matras op actieve wijze het klimaat tussen de huid van de patiënt en het matras.

- De kern van de Thermic™-technologie is PCM (Phase Changing Materiaal), dat een doorlopende laag op het matrasoppervlak vormt. PCM kan overtollige warmte absorberen, verspreiden en doorzetten naar plaatsen buiten het lichaam van de patiënt.
- PCM-technologie helpt om de matrastemperatuur te beheersen, optimaliseert het patiëntencomfort en beschermt de patiënt tegen oververhitting of onderkoeling.
- Er wordt geen ongewenste overmatige hitte verzameld op plaatsen waar sprake is van een hoog risico op decubitus.

## EFFECT VAN HITTE OP DE PATIËNT

“Er is steeds meer bewijs dat het microklimaat tussen huid en het ondersteunende oppervlak een rol speelt in de ontwikkeling van decubitus in Categorie/Fase I en II. Microklimaat betreft vochtigheid en temperatuur. Bij een toename van vochtigheid en temperatuur wordt huid zwakker (kwetsbaarder) en minder stijf.”

“Opgenomen personen met verhoogde huidtemperatuur en transpiratie staan mogelijk bloot aan een verhoogd risico op decubitus.”


Haesler, E. (n.d.). *Emerging therapies for prevention of pressure ulcers. In Prevention and treatment of pressure ulcers: Clinical practice guideline (2nd ed., p. 20–21, 71).*

# Matrasportfolio

## CLINICARE 20

- Het matras is gemaakt van koudschuim en visco-elastisch schuim. Het visco-elastische schuim vormt een complete matrasbovenlaag om maximaal comfort aan de patiënt te kunnen bieden.
- Het matrasoppervlak is zo gevormd dat de lucht tussen de huid van de patiënt en het matras beter circuleert. De profilering van het oppervlak verbetert ook de drukverdeling.

Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg

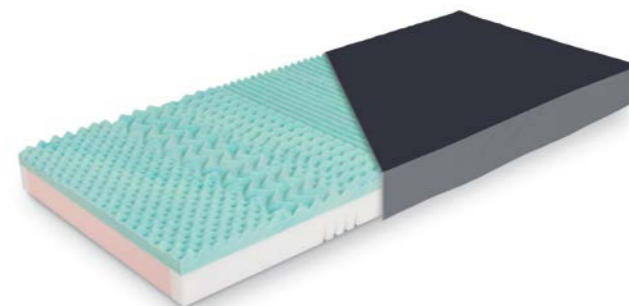

## CLINICARE 10

- Het matras is gemaakt van koudschuim en visco-elastisch schuim.
- Het bovenste deel van het matras bestaat uit drie afzonderlijke ergonomische zones: hoofd, romp en hielen. Het gebied onder het hoofd en de hielen bestaat uit drie schuimsoorten van verschillende dichtheid, hardheid en profilering. De bovenlaag voor het hoofd en de hielsteun bestaat uit visco-elastisch schuim dat geperforeerd is voor een betere luchtcirculatie tussen de huid van de patiënt en het matras.


Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg



## PRIMACARE 20

- Het matras is zeer comfortabel dankzij twee verschillende soorten polyurethaanschuim van verschillende dichtheid en dikte.
- In de risicogebieden heeft de bovenzijde van het matras uitgesneden zones voor het hoofd, de heupen en de hielen. Er is een betere luchtcirculatie tussen de huid van de patiënt en het matras, evenals een optimale drukverdeling.


Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg

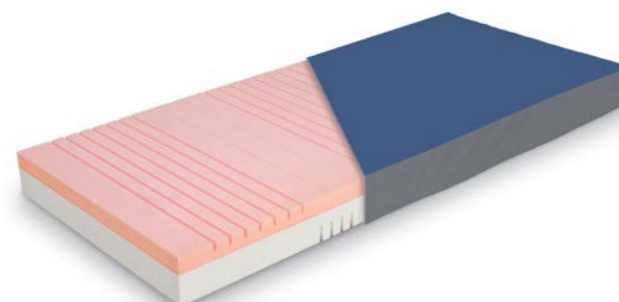

## PRIMACARE 10

- De PrimaCare 10 heeft een gelijkmatig geprofileerde kern over de gehele lengte van het bovenste gedeelte.
- Hoofd- en voeteinde zijn compacter geprofileerd om meer comfort en een betere drukverdeling te kunnen bieden.


Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg

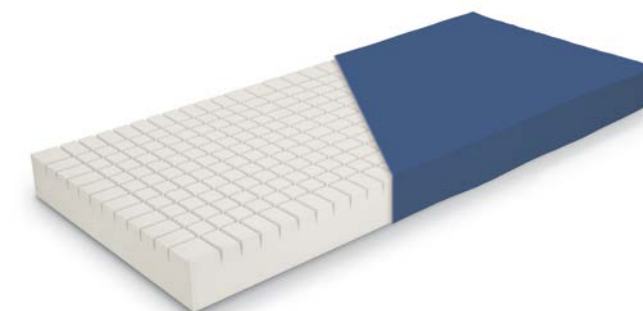

## EFFECTACARE 20

- Een matras met monoblokconstructie en met een preventief decubituseffect.
- De romp heeft een geprofileerde kern voor een betere drukverdeling.

Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg

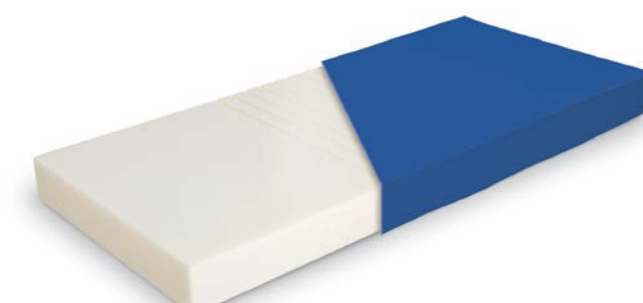

## EFFECTACARE 10

- Het oppervlak van het monoblokmatras heeft een regelmatige, golvende structuur die de luchtcirculatie tussen de huid van de patiënt en het matras verbetert.
- Dankzij de symmetrische structuur kan het matras worden geroteerd en gedraaid voor langer gebruik.

Matras-specificatie	Risico	Gewicht	Max. belasting
	IV	16,5kg	230kg

