

■ ■ wissner-
■ ■ bossershoff

Functionele elegantie in de verpleging

SafeSense®

Bed-Exit-assistent



Bed-Exit-assistent

Wat betekent dat eigenlijk?

SafeSense® maakt het verplegend personeel erop attent dat de bewoner/patiënt het bed heeft verlaten, of op het punt staat dit te verlaten. Daardoor kan snel worden herkend of een bewoner is gevallen en kunnen de mogelijke gevolgen ervan worden verminderd. De Bed-Exit-assistent functioneert in principe als een soort verkeerslicht. De werking kan als volgt duidelijk en zeer eenvoudig worden uitgelegd:




Timer niet geactiveerd



Timer geactiveerd

→ bijvoorbeeld 15 minuten voor een nachtelijk toiletbezoek

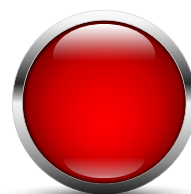

Timer afgelopen

→ signaal op het verplegeroproepsysteem

SafeSense® = veiligheid + vrijheid

Overdag en 's nachts dankzij het intelligente Bed-Exit-systeem

Duurzame valpreventie voor een zo groot mogelijke veiligheid. Dat is waar de Bed-Exit-assistent SafeSense® van wissner-bosserhoff staat.

Het gemiddeld aantal valincidenten in verpleeghuizen en klinieken bedraagt ongeveer 1,5 valincident per bed per jaar*. De mogelijke gevolgen voor de gezondheid van vallen zijn juist bij oudere mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar.

Met SafeSense® kan het veiligheidsniveau vooral tijdens nacht- en weekenddiensten met minder personeel aanzienlijk worden verbeterd. Tijdens de nachtrust kan de Bed-Exit-assistent bijdragen aan de vermindering van het gebruik van onrusthekken. Op die manier blijft de vrijheid van de bewoner/patiënt behouden. Het automatische nachtlucht zorgt ervoor dat de bewoner/patiënt 's nachts veilig de weg naar het toilet kan vinden. Het nachtlucht wordt bij het verlaten van het bed automatisch geactiveerd en dooft wanneer de bewoner/patiënt weer in bed ligt. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de flexibel in te stellen en zo aan de individuele mobiliteitsniveaus van de bewoners/patiënten.

5

**miljoen valincidenten
bij oudere mensen
per jaar:**

Bijna een derde van de personen van 65 jaar en ouder en de helft van de personen van 80 jaar en ouder valt jaarlijks minimaal een keer. Alleen al in Duitsland gebeuren per jaar tot rond 5 miljoen valongelukken bij oudere mensen.

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter. (Gezondheid en ziekte op hoge leeftijd)
Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlin 2009)



**Preventie met
sentina
lage verpleegbedden**



**Preventie met
image 3 voor
universele
ziekenhuisbedden
met lage stand**



Valpreventie in verpleeghuizen en klinieken





Meer veiligheid – minder valincidenten/VBM*

- Snellere reactietijd bij valincidenten
- Hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
- Ideaal in combinatie met onze lage bedden sentida en image 3 met de SafeFree®-onrusthekken
- Systematische doorvoering van bevindingen volgend uit het initiatief tegen fixatie: de 'Werdenfelser-methode'***



Mobiliteit behouden

- Door lage bedden sentida / image 3
- Door WIBO 3-traps-strategie
- Door WIBO Safe-Free®-onrusthekken



Individuele bescherming

- Nachtelijke toiletbezoeken worden beveiligd door sensorgestuurd nachtlucht
- Met flexibele oproeptiming van verplegend personeel (0 tot 30 min) wordt aan de mobiliteit van bewoners/patiënten aangepast



Uw voordelen als organisatie

- Investeringszekerheid
- Veiligheid voor patiënt/bewoner in elke werkpositie
- Effectief en efficiënt werken
- Geen bijkomende kosten voor veiligheidsaccessoires

Zo bestelt u SafeSense®

Voor WIBO-verpleegbedden



- Geïntegreerd als optie
- Als pakket voor achteraf inbouwen voor alle elektrische verpleegbedden van wissner-bosserhoff (vanaf 2002)
- Verkrijgbaar met kabel of draadloos


Voor ziekenhuisbed image 3



- Optioneel te bestellen
- Verkrijgbaar of aanbevolen met kabel of draadloos

SafeSense® componenten


Sensormat 2

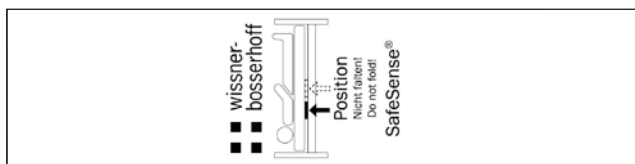


artikel 02-000781

80 x 20 cm


Bed-Exit-Box 2

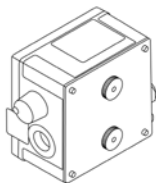

Artikel 04-1851
Met universele bevestiging
Verkrijgbaar als kabel- of draadloze uitvoering

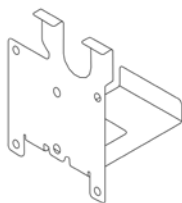


artikel 01-011193
Plaat voor DU09-motor

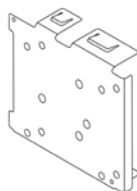

artikel 01-011194
Plaat voor Q7-motor

Aansluitset

Adapterkabel met en zonder aan-/uitschakelaar en bijpassende stekker voor aansluiting op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor de kabeluitvoering en draadloze uitvoering

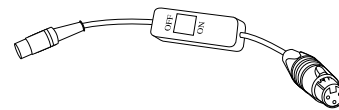


Draadloze ontvanger

Alleen verkrijgbaar voor verpleegbedden!




Oproepontvanger voor installaties voor het verplegersignaal

- Via WIBO-adapterstekker te koppelen met alle normale installaties voor het verplegersignaal
- Draadloze micro-ontvanger
- Er kunnen 32 zenders worden opgeslagen
→ Individuele kameruitrusting op basis van de wensen/behoefte van de bewoner
- Met verpleegfunctie. Oproep wordt 15 minuten geblokkeerd.




Stopcontact oproepmelder

- Akoestische en visuele signalering van het verplegersignaal
- Eenvoudige bevestiging rechtstreeks op oproepmelder
- Uitstekend geschikt voor het gebruik in kleinere verpleeghuizen en woongroepen zonder installatie voor verplegersignaal
- Energiezuinig! In stand-by slechts 0,3 W



Stopcontact ontvanger

- Schakelt bijv. de oriëntatieverlichting of staande lamp in de kamer in
- Er kunnen 32 zenders worden opgeslagen
- Het sensorisch radiosignaal wordt bij het verlaten van het bed automatisch gestuurd
- Energiezuinig! In stand-by slechts 0,2 W



Impulstelefoon incl. armbandzender

- Huisalarmcentrale en comfortabele telefoon in één
- De ontvangen oproep wordt achtereenvolgens naar drie voorgeprogrammeerde oproepnummers doorgestuurd
- Door de geïntegreerde handsfree-inrichting kan gedurende 3 minuten met de bewoner worden gesproken
- Verlicht display

Werking



Gebruiksaanbevelingen

	VPH* / VZH* met verplegeroproepsysteem	Geen VZH* / VPH* en woongroepen <u>zonder</u> verplegeroproepsysteem	Thuisverzorging
Bed-Exit-Box 2	Kabel	✓	
	Draadloos	✓	✓
Oproep-ontvanger	✓		
Stopcontact oproepmelder		✓	✓
Stopcontact ontvanger	✓	✓	✓
Impulstelefoon incl. armbandzender		✓	✓

Members of LINET Group



wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl



EU-patent-Nr.:
EP000001623654
EP000002052707

